

# Einfach und unkompliziert zu einem wunderschönen **Lächeln**

das logische, innovative Restaurationssystem,  
geschaffen um Zeit zu sparen - jederzeit



Your Smile. Our Vision.




## Wie der Zahnaufbau die Farbgebung bestimmt.

- Da die Zahnfarbe in erster Linie durch das Dentin und nicht den Schmelz bestimmt wird, ist die korrekte Bestimmung der Dentinfarbe für eine optimale Anpassung der Gesamtzahnfarbe ausschlaggebend.
- Der Schmelzmasse ist relativ transluzent, muß aber einfach zu polieren sein.

### Das Dentin bestimmt zu 95% die Zahnfarbe<sup>1</sup>

- Eine Opazität
- Farbtönsättigung
- Fluoreszenz

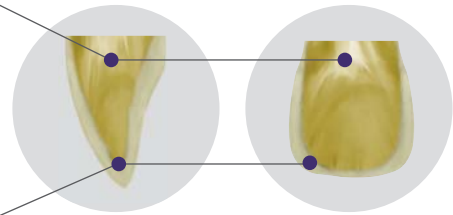

### Der Schmelz macht 5% der Zahnfarbe aus<sup>1</sup>

- Lichtdurchlässigkeit
- geringer Farbton
- Opaleszenz


## Aura – wie eine lineare Scala einen einfachen Zugang zur Zahnfarbbestimmung ermöglicht.

Aura ist das Resultat einer intensiven fünfjährigen Zusammenarbeit internationaler Material- und Zahnrestaurationsexperten.


- Nahezu alles Dentin hat einen ähnlichen Farbton, der in die Rot-Braun-Gelb Region fällt
- Aura fokussiert auf den Bereich, in dem die Zahnfarben variieren - der „Chroma“
- Die Chroma sagt etwas über die Farbsättigung aus, gemessen in %-Sättigung


Dieses lineare und wissenschaftlich fundierte Arrangement macht die individuelle Farbbestimmung einfach und vorhersehbar

DIE GLEICHMÄßIGEN ABSTÄNDE UND DER UMFANG DES CHROMAARRANGEMENTS GEWÄHRLEISTEN EINE GUTE VORHERSEHBARKEIT DES ERGEBNISSES

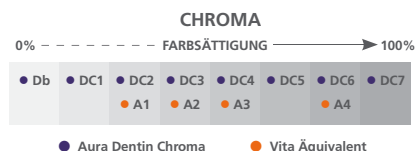

AURA IST DAS EINZIGE SYSTEM MIT NUR EINER OPAZITÄT

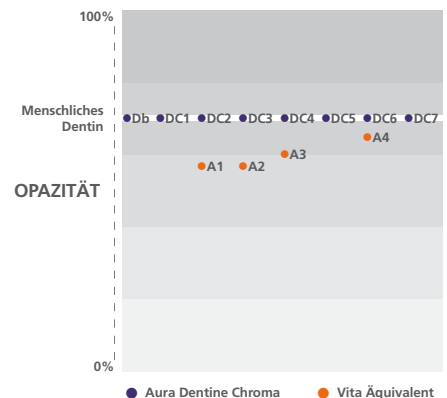

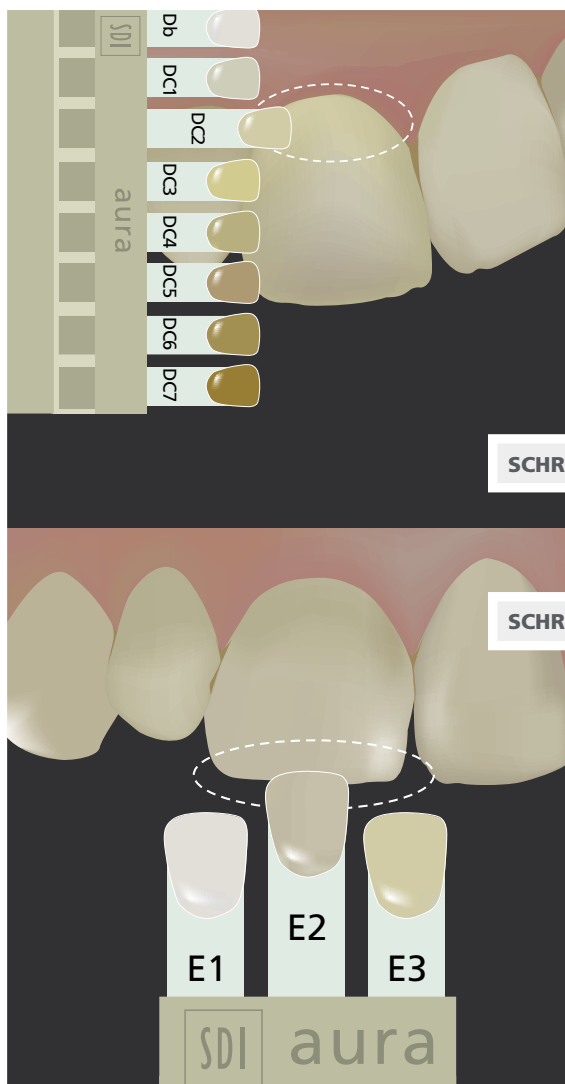

SCHRITT 1

## Aura – ein einfacher Zugang zu exakter Farbidentifizierung und Bestimmung

Da die Zahnfarbe hauptsächlich vom Dentin und nicht vom Schmelz bestimmt wird, kommt der korrekten Bestimmung der Dentinfarbe höchste Priorität zu.

► Bestimmen sie die Dentinfarbe, wo sich exponiertes **Dentin** befindet, oder im zervikalen Bereich des Zahns

SCHRITT 2

► Bestimmen Sie die Schmelzfarbe an der inzisalen Kante der Nachbarzähne des zu restaurierenden Zahns

## Aura – gewährleistet einfach zu erreichenden Spiegelglanz

Aura's Mikrofüller sind für einfachste Polierbarkeit zu einem Spiegelglanz Finish verantwortlich. Dieser Glanz hält für unbestimmte Zeit an.

Wählen Sie die Schmelzfarbe unter Berücksichtigung des Patientenalters.

- E1 Junge, oder gebleichte Zähne
- E2 Erwachsenenzähne
- E3 Seniorenzähne




---

## Minimaler Volumenschrunpf für höchste Dimensionsstabilität

- Aura kombiniert eine neuartiges, niedrighschrumpfendes Resin mit neuen ultra hochdichten (UHD) Füllern.

VOLUMENSCHRUMP IN (%)<sup>2</sup>

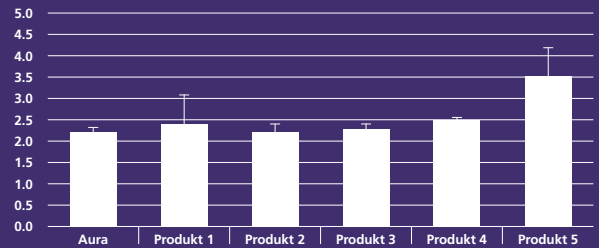


---

## Höchste Werte für Aura´s Biegefestigkeit

- Aura´s ausgezeichnete Biegefestigkeit bedeutet, dass es in der Lage ist den im Mund übertragenen Kräften zu widerstehen.

BIEGEFESTIGKEIT IN MPa<sup>2</sup>

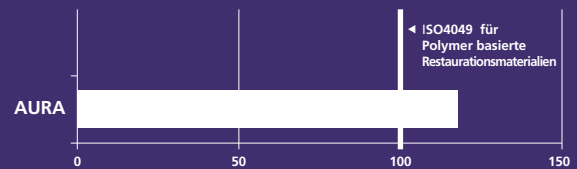


---

## Aura´s beeindruckende Druckfestigkeit

- Die einzigartige Morphologie der UHD Füller garantiert eine extrem stabile Vernetzung, die zu einer sehr hohen Druckfestigkeit führt.

DRUCKFESTIGKEIT (MPa)<sup>2</sup>

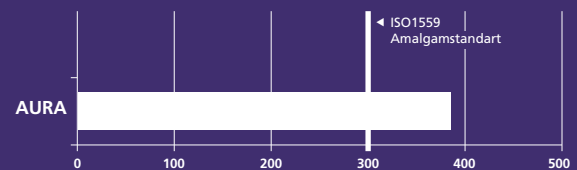

---

## Bulk fill

- Für schnelle posteriore Füllungen, für die eine Schmelzabdeckung nicht notwendig ist.
- Entwickelt um eine große Polymerisationstiefe und Stabilität zu gewährleisten.

---







## Vielzweck Gebrauch

- Ebenfalls in 4 Multipurpose Chroms Farben MC2, MC3, MC4 und MC5 erhältlich. Diese sind ideal für ästhetische Einschicht- und Bulkfill - Anforderungen.

# Aura, eine Australische Innovation.

- Basierend auf dem natürlichen Aufbau und Farbgebung von Dentin und Schmelz.
- Einfache Schichttechnik zur Reproduktion der natürlichen Zahnfarben.
- Einfache und effiziente Polierbarkeit und Formgebung.
- Entwickelt, um auch dem vielbeschäftigten Kliniker die Farbbestimmung zu vereinfachen.



TEILENUMMER	MENGE	SPRITZEN	TEILENUMMER	MENGE	COMPLETS
 8565100		<b>Aura Master EinführungsKit - Spritzen</b> 8 4g Spritzen (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7) 3 3g Spritzen (E1, E2, E3) 1 4g Spritzen (bulk fill) 2 AURA MASTER FARBPALETTE	 8565101		<b>Aura Master EinführungsKit - Complets</b> 24 0.25g Complets (Db, DC1, DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7) 24 0.2g Complets (E1, E2, E3) 3 0.25g Complets (bulk fill) 1 Complet Applikator 2 AURA MASTER FARBPALETTE
 8565102		<b>Aura Spritzen Starter Kit - Light</b> 3 4g Spritzen (DC1, DC2, DC4) 1 3g Spritzen (E2) 1 AURA LIGHT FARBPALETTE	 8565103		<b>Aura Complet Starter Kit – Light</b> 60 0.25g Complets (DC1, DC2, DC4) 20 0.2g Complets (E2) 1 AURA LIGHT FARBPALETTE
 8565104		<b>Aura Spritzen Starter Kit - Medium</b> 3 4g Spritzen (DC1, DC3, DC5) 1 3g Spritzen (E2) 1 AURA MEDIUM FARBPALETTE	 8565105		<b>Aura Complet Starter Kit – Medium</b> 60 0.25g Complets (DC1, DC3, DC5) 20 0.2g Complets (E2) 1 AURA MEDIUM FARBPALETTE
 8565106		<b>Aura Spritzen Multipurpose Kit</b> 4 4g Spritzen (MC2, MC3, MC4, MC5) 1 AURA MULTI CHROMA FARBPALETTE	 8565107		<b>Aura Complet Multipurpose Kit</b> 80 0.25g Complets (MC2, MC3, MC4, MC5) 1 AURA MULTI CHROMA FARBPALETTE
 8560011		<b>Aura Spritzen Refills</b> 1 Db – 4g	 8565011		<b>Aura Complet Refills</b> 20 Db – 0.25g
8560004		1 DC1 – 4g	 8565004		20 DC1 – 0.25g
8560005		1 DC2 – 4g	 8565005		20 DC2 – 0.25g
8560006		1 DC3 – 4g	 8565006		20 DC3 – 0.25g
8560007		1 DC4 – 4g	 8565007		20 DC4 – 0.25g
8560008		1 DC5 – 4g	 8565008		20 DC5 – 0.25g
8560009		1 DC6 – 4g	 8565009		20 DC6 – 0.25g
8560010		1 DC7 – 4g	 8565010		20 DC7 – 0.25g
8560012		1 Bulk Fill – 4g	 8565012		20 Bulk Fill – 0.25g
8560001		1 E1 – 3g	 8565001		20 E1 – 0.2g
8560002		1 E2 – 3g	 8565002		20 E2 – 0.2g
8560003		1 E3 – 3g	 8565003		20 E3 – 0.2g
8560014		1 MC2 – 4g	 8565014		20 MC2 – 0.25g
8560015		1 MC3 – 4g	 8565015		20 MC3 – 0.25g
8560016		1 MC4 – 4g	 8565016		20 MC4 – 0.25g
8560017		1 MC5 – 4g	 8565017		20 MC5 – 0.25g



Your Smile. Our Vision.

Aura wird in Australien hergestellt von SDI Limited Bayswater, Victoria 3153. 1 800 337 033, [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
Austria 00800 022 55734, Brazil 0800 770 1735, France 00800 022 55 734, Germany 0800 100 5759  
Ireland 01 886 9577, Italy 800 780625, New Zealand 0800 734 034, Spain 00800 022 55 734  
United Kingdom 00800 022 55 734, USA & Canada 1 800 228 5166

**Referenzen:** 1. Chu S.J, Devigus A, Paravina R.D, Mielezsko A. J; Fundamentals of Color – Shade Matching and Communications in Esthetic Dentistry; p.89, 2nd Edn.  
2. Data on file, SDI Limited 2014.



M100171